

LA MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX : NOTRE SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1957




CATALOGUE NÉONATOLOGIE


QUI SOMMES-NOUS ?

Entreprise familiale, le Laboratoire Huckert's International développe et commercialise des désinfectants et des cosmétiques uniques, **totalement sécuritaires** et de haute performance pour l'ensemble de vos process de nettoyage et de désinfection.

La renommée de notre laboratoire repose sur la qualité et la technicité de ses produits, le dynamisme de ses équipes et l'équilibre subtil entre **la chimie fine et la force des plantes**.

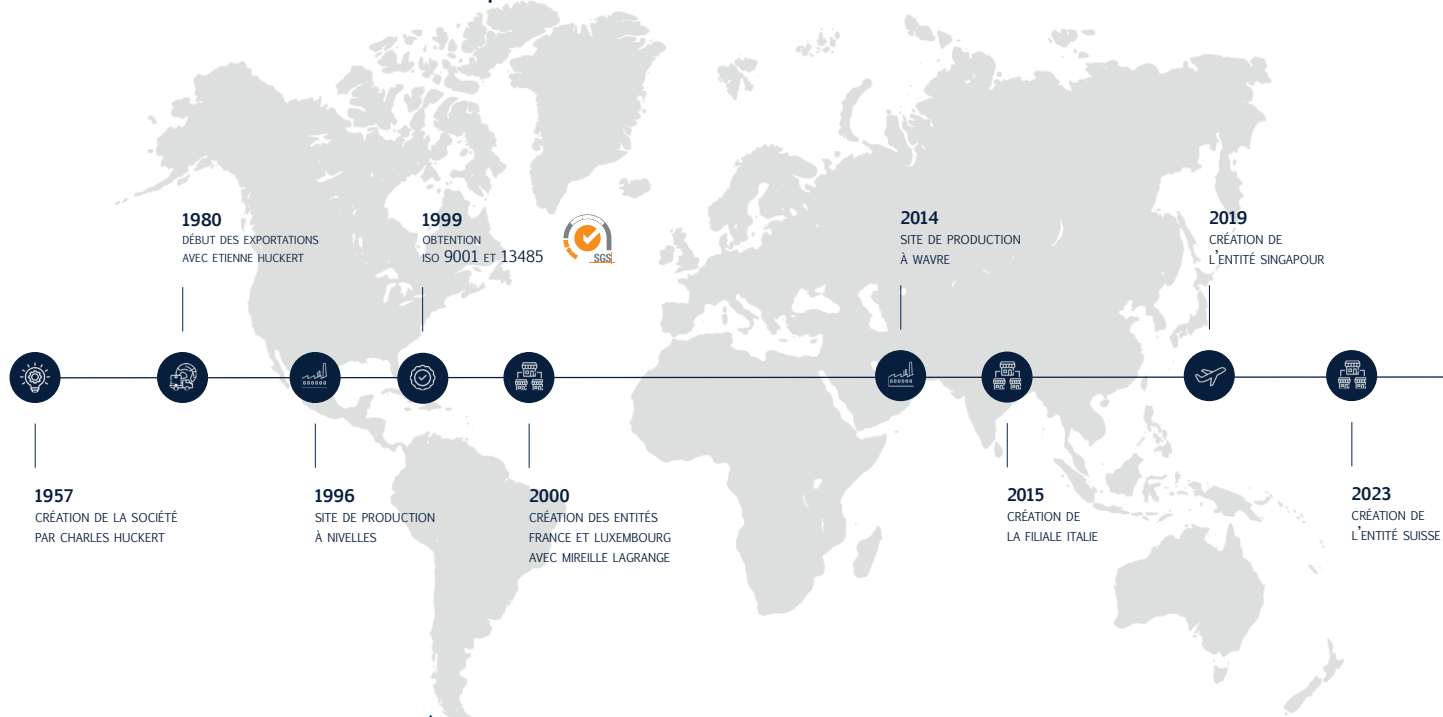

POURQUOI DÉSINFECTER ?

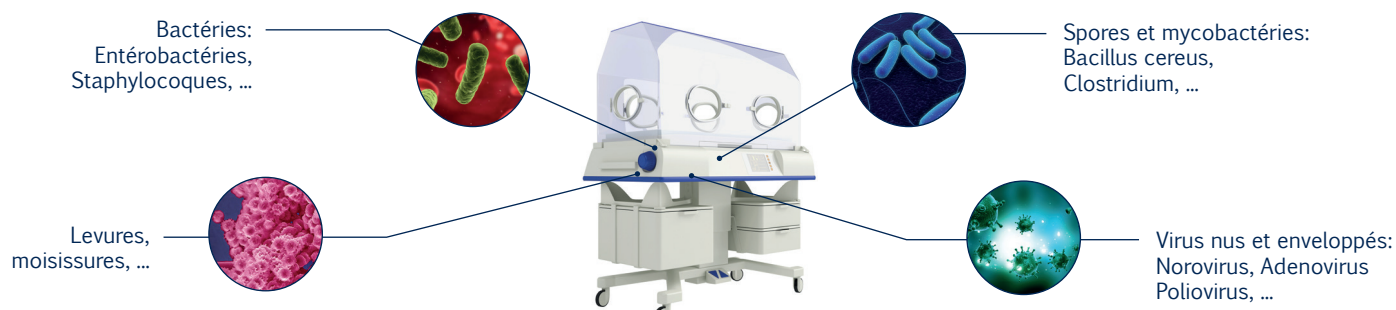

POURQUOI DÉSINFECTER ?

À température idéale et en présence de nutriments, les micro-organismes se répliquent toutes les 20 minutes. Ainsi, une très petite quantité de germes pathogènes, originaires d'une source contaminée (mains, nez, bouche, yeux, surface, matière première) peut engendrer de toxi-infections alimentaires foudroyantes.

Il est primordial d'éliminer tout risque de contamination par des procédures de lavage et de désinfection efficaces et maîtrisées tout au long du processus de fabrication. Seul un contrôle méticuleux peut garantir la sécurité de la responsabilité professionnelle.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un produit dangereux n'est pas gage d'un produit performant : des **normes européennes** vous permettent d'apprécier l'efficacité de vos produits. Les conditions de tests doivent se rapprocher au plus près des conditions réelles d'utilisation, et aller au-delà des simples tests d'efficacité en suspension (en phase liquide).

«On ne désinfecte bien que ce qui est propre»: **alcool, Javel, acide péracétique, peroxyde d'hydrogène, soude caustique** ou de nombreux désinfectants n'ont **aucune propriété détergente**. Leur performance de désinfection est affectée par la présence de saleté protéique ou autres interférents et par leur température d'utilisation.

NOTRE MISSION

Expert en **bio-décontamination et désinfection de haut niveau**. Notre mission est d'assurer une désinfection sans faille sur l'ensemble de la flore pathogène même en conditions d'interférences (**bactéries, levures, champignons, mycobactéries, spores, virus nus et virus enveloppés**) sans provoquer d'effets secondaires indésirables.

“ *Ne remplacez pas un risque biologique par un danger chimique* ”



SANS DANGER POUR
L'OPÉRATEUR



SANS DANGER POUR
LE NOURRISSON



SANS DANGER POUR
LE MATÉRIEL



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT

Nos produits sont **sans CMR, sans perturbateur endocrinien** et ne présentent **aucun risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique**.

pH
neutre

✓ **FORMULE SANS**
→ COMPOSANT CMR
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

Nous nous sommes toujours engagés à **fabriquer et contrôler nos biocides selon les mêmes exigences que nos dispositifs médicaux**. L'ensemble de nos biocides répondent à la **réglementation Européenne Biocide N°528/2012**.

NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le développement durable fait partie intégrante du système de management de la qualité de notre laboratoire.

Nos **Valeurs d'Entreprise Familiale** telles que **la qualité, la santé et l'éthique**, sont au cœur de toutes nos démarches et fédèrent l'ensemble de nos collaborateurs.

L'ampleur de notre engagement s'étend de la prise en charge du caractère nocif de nos produits pour L'OCME (Opérateur, Consommateur, Matériel, Environnement) à la réduction de notre impact environnemental dictée par notre activité.

Notre politique engagée en faveur de l'environnement nous pousse sans cesse à analyser, challenger et minimiser efficacement l'impact de notre activité.



- ✓ **Aucun rejet toxique ou dangereux** pour l'environnement dans les étapes du processus de fabrication de nos produits.
- ✓ **Sans risque pour l'environnement.**
- ✓ Des formulations enrichies en **huiles essentielles** et extraits concentrés de **plantes médicinales**.
- ✓ «De la désinfection à froid» pour une **facilité et rapidité d'action**.
- ✓ Des vaporisateurs prêts à l'emploi **sans gaz propulseur**.
- ✓ Une **vaste gamme** de produits concentrés.
- ✓ Des emballages issus d'un **PE green*** avec une **empreinte carbone négative**, et entièrement **recyclable**.
- ✓ Une cotisation pour le **traitement des déchets recyclés**.
- ✓ Des systèmes **économiques** de mélange et dosage **automatique** « ECONOMIC ».
- ✓ Des qualités constantes et traçables.

100%
EMBALLAGES
RECYCLABLES
EN MATIÈRE
VÉGÉTALE*



CARTONS,
EMBALLAGES ET
LINGETTES RECYCLABLES.
PENSEZ À TRIER VOS
DÉCHETS!

* Sous réserve de disponibilité de la matière première.

L'INNOVATION EN DÉSINFECTION À FROID



UMONIUM³⁸
maître en désinfection



**SANS RÉSIDU
APRÈS RINÇAGE**





** Sous réserve de disponibilité de la matière première.*

UN DÉSINFECTANT ADAPTÉ À CHACUN DE VOS BESOINS

Il aura fallu 38 tentatives pour obtenir la formule qui associe **performance, rapidité, stabilité, aucun risque chimique et pH neutre.**

La formulation de l'UMONIUM³⁸ démontre un spectre d'activité considérablement plus large. Les **temps de contact sont courts et réalistes**. Les **concentrations d'utilisation sont faibles**. Le caractère tensioactif de la formule permet à la fois une **action puissante** de détergence, de désinfection de haut niveau et l'élimination du film gras, protéique et du biofilm, par trempage, circulation de flux, essuyage humide, vaporisation, projection de mousse... À froid comme à chaud.

Isopropyl-Tridecyl-Dimethyl Ammonium

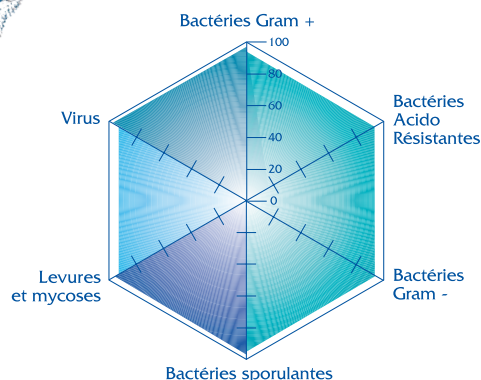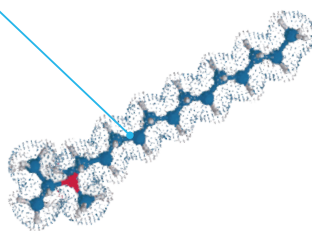

**NOUS OFFRONS L'ALTERNATIVE
AUX PRODUITS CHIMIQUES
DANGEREUX ET CORROSIFS**

**pH
neutre**

✓ **FORMULE SANS**
→ COMPOSANT CMR
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

UNE NOUVELLE CERTIFICATION POUR NOS DISPOSITIFS MÉDICAUX

Le Laboratoire Huckert's International est, en 2023, en cours de procédure de certification au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. Celui-ci concerne un champ de produits élargi par rapport à la directive 93/42/CEE et contient de nouvelles règles de classifications. Les améliorations majeures incombant à ce nouveau règlement sont :

- ✓ une évaluation de conformité renforcée (évaluation clinique)
- ✓ une augmentation du suivi post-commercialisation
- ✓ une meilleure traçabilité des produits suite à la mise en place des codes « UDI » (unique device identifier)
- ✓ une gestion des risques renforcée
- ✓ une transparence accrue par la mise en place de la plateforme européenne « EUDAMED »

La mise en conformité du Laboratoire Huckert's International en vue de la certification garantit l'excellence et la qualité désinfectants dispositifs médicaux toujours plus performants.

UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE

	SITUATIONS & CONDITIONS DE LABORATOIRE	RÉDUCTION BACTÉRIES	RÉDUCTION FONGIQUE	RÉDUCTION VIRUS	RÉDUCTION MYCOBACTÉRIES	PERFORMANCE DE DÉSINFECTION
PHASE 1	ESSAI DE SCREENING 	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	PERFORMANCE FAIBLE ★ Évaluation artificielle
PHASE 2 étape 1	ESSAI EN SUSPENSION 	99,999% 5 log EN 1276 EN 13727 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	99,990% 4 log EN 1650 EN 13624 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	99,990% 4 log EN 14476 EN 14476 <i>Poliovirus 1</i> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus murin</i>	99,990% 4 log EN 14348 EN 14348 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	PERFORMANCE INTERMÉDIAIRE ★ ★ Validation limitée
PHASE 2 étape 2	ESSAI EN CONDITION SÈCHE 	99,990% 4 log EN 13697 99,999% 5 log EN 17387 EN 14561 EN 16615 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	99,990% 4 log EN 13697 EN 17387 EN 14562 EN 16615 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	99,990% 4 log NA EN 16777 EN 17111 <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i> <i>Vaccinia virus</i> <i>Parvovirus</i>	99,990% 4 log NA EN 14563 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	HAUTE PERFORMANCE ★ ★ ★ Validation proche des conditions pratiques
PHASE 3	ESSAI EN CONDITIONS PRATIQUES 	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	TRÈS HAUTE PERFORMANCE ★ ★ ★ ★ Validation en condition pratique

NORME CADRE EN 14885 : 2022

EN = Standard Normatif Européen

EN XXX = DM/Instruments

EN XXX = Biocides

EN XXX = Action mécanique

NA = Non Applicable

POURQUOI UTILISER NOS PRODUITS ?



UMONIUM³⁸
maître en désinfection

NOS SOLUTIONS DÉSINFECTANTES ISSUES DE LA CHIMIE FINE



LARGE SPECTRE
BACTÉRICIDE, LEVURICIDE,
MYCOBACTÉRICIDE,
VIRUCIDE & SPORICIDE



SÉCURITAIRES
SANS SUBSTANCE CMR
OU PERTURBATEUR
ENDOCRINIEN



SANS RÉSIDU
APRÈS RINÇAGE



TEMPS DE
CONTACTS
RÉALISTES



STABLES



ININFLAMMABLES



NON CORROSIVES



SANS VAPEUR
DANGEREUSE



NON POLLUANTES



SURFACTANTS

NOS SOLUTIONS DERMATOLOGIQUES ISSUES DES PLANTES MÉDICINALES


PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S



NON POLLUANTES



TEXTURE NON
COLLANTE



GELS HYDROALCOOLIQUES
EFFICACES CONTRE MRSA
ET CORONAVIRUS



SÉCURITAIRES
INGRÉDIENTS SÉLECTIONNÉS
PARMI LES PLUS
SÉCURITAIRES



USAGES
FRÉQUENTS



POUR TOUTE
LA FAMILLE



TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT



PARFUM 100%
NATUREL



PEAUX FRAGILES



FORMULES AUX
HUILES ESSENTIELLES

AU SERVICE DE VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ



SERVICE NÉONATOLOGIE

Le risque d'infections nosocomiales y est plus important de par l'immaturité du système immunitaire du nouveau-né (notamment chez les grands prématurés) les rendant plus sensibles aux infections respiratoires virales ou bactériennes. Il est cependant inconcevable de recourir à des produits de désinfection standard au sein de ces services, où le risque chimique ne doit pas se substituer au risque biologique.

Les produits doivent être choisis avec soin, pour ne provoquer aucun inconfort au nourrisson. Ils doivent présenter le moindre risque cutané ou respiratoire possible, ne comporter aucune substance **CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique)**, ni perturbateur endocrinien.

Le Laboratoire Huckert's International, spécialiste des environnements à hauts risques, a développé la gamme **UMONIUM³⁸ NEUTRALIS** qui atteste d'études Internationales, répondant de façon concomitante aux besoins impératifs de performances et d'innocuité.



BIBERONNERIE ET LACTARIUM

La gamme **UMONIUM³⁸ MASTER FOOD** propose de nouveaux détergents-désinfectants contact alimentaire de spectre total, totalement sécuritaire et spécialement recommandé en biberonnerie (étude SF2H 2019 France).

Inodore, incolore, sans risque chimique (sans CMR, sans perturbateur endocrinien), non corrosif (pH neutre), non inflammable, et remarquablement stable, la gamme **UMONIUM³⁸ MASTER FOOD** répond aux plus hautes normes d'efficacité. Elle élimine l'ensemble des pathogènes et le biofilm sans présenter aucun résidu après rinçage.



BLOCS/SALLES DE RÉANIMATION

L'ensemble des surfaces et des dispositifs médicaux directement impliqués au service de néonatalogie, doivent être impérativement nettoyé et désinfecté par des produits de niveau Dispositif Médical, adaptés aux environnements à hauts risques.


Ils ne doivent présenter aucun risque chimique qui pourrait porter atteinte au fœtus ou au nouveau-né.



ÉCHOGRAPHIE

De nouvelles recommandations concernant la désinfection des sondes endovaginales ont été émises, mais le recours à des produits comme le dioxyde de chlore ou l'acide peracétique sont incompatibles avec des actes aussi sensibles que l'obstétrique.

Les lingettes **UMONIUM³⁸ PROBES** offrent une alternative d'excellence ; **sans composant CMR ni perturbateur endocrinien**, elles répondent aux plus hautes normes de performance sur l'ensemble des pathogènes. Leur innocuité est validée jusqu'en environnement embryonnaire, avec un protocole simple d'application.

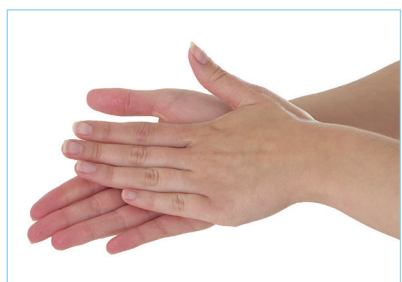

HYGIÈNE DES MAINS ET TOILETTE DU NOUVEAU NÉ

L'hygiène des mains du personnel, et encore plus celle des nourrissons ou des petits prématurés ne peut être effectuée qu'avec des produits spécifiques, ne présentant pas le moindre risque pour le nouveau-né.

La gamme **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **genesis** 100% naturel (Gel hydroalcoolique) a été développées spécifiquement.

Toilette du nourrisson et du prématuré : *gamme à venir prochainement.*

NOS SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE MÉTIER



UMONIUM³⁸ MASTER FOOD



Biocide TP2 & TP4



UMONIUM³⁸ MASTER FOOD SPRAY



Biocide TP2 & TP4



UMONIUM³⁸ MASTER FOOD TISSUES



Biocide TP2 & TP4

NOS BIOCIDES POUR LES SURFACES EN CONTACT AVEC LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Spécialement développé **pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires**, la gamme UMONIUM³⁸ **MASTER FOOD** vous propose des biocides sans parfum ni huile essentielle. Conforme à la **nouvelle réglementation Européenne Biocide N°528/2012**, elle convient parfaitement à l'usage quotidien des surfaces et équipements soumis à des **points critiques HACCP**.

Détergents - désinfectants et dégraissants, nos produits sont **stables, de pH neutre, sécuritaires** (inflammables, sans risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique) **et sans composant CMR ni perturbateur endocrinien**. Efficaces sur l'ensemble de la **flore pathogène**, ils répondent aux plus hauts **standards normatifs européens** et ne laissent **aucun résidu après rinçage**.



Radiostérilité double emballage: disponible sur contrat

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage ou essuyage humide.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).

CONDITIONNEMENTS

25mL, 1L, 5L et 25L

EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Biberons
- ✓ Chauffe-biberon
- ✓ Tire-lait
- ✓ Matériel de pesée.
- ✓ Frigo/congélateur

TEMPS DE CONTACT



15 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Spray prêt à l'emploi avec double embout (vaporisation fine ou en mousse) pour une application par essuyage humide.
- ✓ 500 ml permet de traiter une surface de 100 m².

CONDITIONNEMENTS

500 ml.

EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Biberons
- ✓ Chauffe-biberon
- ✓ Tire-lait
- ✓ Matériel de pesée.
- ✓ Frigo/congélateur

TEMPS DE CONTACT



15 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi pour une application par essuyage humide.
- ✓ Une lingette (20 x 20 cm) permet de traiter une surface de 3 m².

CONDITIONNEMENTS

Boîte distributrice de 100 lingettes (20 x 20 cm).

EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Biberons
- ✓ Chauffe-biberon
- ✓ Tire-lait
- ✓ Matériel de pesée.
- ✓ Frigo/congélateur

TEMPS DE CONTACT



5 minutes.

UMONIUM³⁸
NEUTRALIS



Dispositif Médical Classe IIb

UMONIUM³⁸
NEUTRALIS SPRAY



Dispositif Médical Classe IIb

UMONIUM³⁸
NEUTRALIS TISSUES



Dispositif Médical Classe IIb

NOS DISPOSITIFS MÉDICAUX POUR LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS SENSIBLES

Particulièrement recommandé **pour les environnements à hauts risques**, la gamme UMONIUM³⁸ **NEUTRALIS** vous propose des dispositifs médicaux sans parfum ni huile essentielle à l'**innocuité TOTALE validée jusqu'à l'environnement embryonnaire** (validations Mouse Embryo Assay et Human Sperm Survival Assay). Conforme à la **DE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux** (annexe II, excl. §4), elle convient parfaitement à l'usage quotidien des surfaces et équipements classés dispositifs médicaux et ce, des environnements les plus sensibles.

Détergents - désinfectants, nos produits sont **stables, de pH neutre, sécuritaires** (inflammables, sans risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique) **et sans composant CMR ni perturbateur endocrinien**. **Efficaces sur l'ensemble de la flore pathogène**, ils répondent aux plus hauts **standards normatifs européens** et ne laissent **aucun résidu après rinçage**.



100%

EMBALLAGES RECYCLABLES
EN MATIÈRE VÉGÉTALE*



Radiostérilité double emballage: disponible sur contrat

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage ou essuyage humide.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).

CONDITIONNEMENTS

25mL, 1L et 5L.

EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Couveuses/incubateurs
- ✓ Giraffe/tables radiantes
- ✓ Berceaux
- ✓ Matériel d'imagerie
- ✓ Instrumentation

TEMPS DE CONTACT



10 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Spray prêt à l'emploi avec double embout (vaporisation fine ou en mousse) pour une application par essuyage humide.
- ✓ 500 ml permet de traiter une surface de 100 m².

CONDITIONNEMENTS

500 ml.

EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Couveuses/incubateurs
- ✓ Giraffe/tables radiantes
- ✓ Berceaux
- ✓ Matériel d'imagerie
- ✓ Instrumentation

TEMPS DE CONTACT



5 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi pour une application par essuyage humide.
- ✓ Une lingette (20 x 20 cm) permet de traiter une surface de 3 m².

CONDITIONNEMENTS

Pochette unidose et boîte distributrice de 100 lingettes (20 x 20 cm).

EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Couveuses/incubateurs
- ✓ Giraffe/tables radiantes
- ✓ Berceaux
- ✓ Instrumentation
- ✓ ...

TEMPS DE CONTACT



5 secondes.

NOS SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE MÉTIER



Dispositif Médical Classe IIb

SONDES

Spécialement développées pour la désinfection des échographes, des sondes de surfaces et endocavitaires, les lingettes **UMONIUM³⁸ PROBES** sont sans émanation toxique et tuent les germes dès 5 secondes.



— Radiostérilité double emballage: disponible sur contrat —

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi pour une application par essuyage humide.
- ✓ Une lingette (20 x 20 cm) permet de traiter une surface de 3 m².

CONDITIONNEMENTS

Pochette unidose et boîte distributrice de 100 lingettes (20 x 20 cm).

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Traitement des sondes endovaginales pour le suivi gynécologique et échoguidage
- ✓ Sondes d'échographie

TEMPS DE CONTACT



5 secondes.



GEL HYDROALCOOLIQUE

FORMULE INODORE ENRICHIE EN ACTIFS ÉMOLLIENTS

L'utilisation répétée de solutions hydroalcooliques provoque un dessèchement profond de la couche cornée. La peau perd son élasticité et la moindre traction peut engendrer une déchirure du tissu épidermique.

Enrichi en actifs émollissants, hydratants et régénérants, **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **genesis** hydrate en profondeur tout en vous garantissant une désinfection de grade hygiénique et chirurgical.



POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains qui ont besoin d'être désinfectées



**DÉSINFECTION
HYGIÉNIQUE**

→ Validée dès 30 sec.



**DÉSINFECTION
CHIRURGICALE**

→ Validée dès 3 min.

CONDITIONNEMENTS

100 ml, 400 ml et 1L.

NOM	PHOTO(S)	ARTICLE N°	DÉSIGNATION	CARTON
		PF 15515	Easydose 25 ml	2 x 50 pieces
		PF 12510	Flacon doseur 1 L	12 x 1 L
		PF 12512	Bidon de 5 L avec pompe	4 x 5 L
		PF 12515	Flacon doseur 125 mL	24 x 125 mL
		PF 12608	Flacon vapo 500 mL	20 x 500 mL
		PF 10769	Boîte de 100 coupons (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 10773	500 pochettes individuelles (20 x 20 cm)	500 x 1
		PF12615	Easydose 25 ml	2 x 50 pièces
		PF 12505	Flacon doseur 1 L	12 x 1 L
		PF 12506	Bidon de 5 L avec pompe	4 x 5 L
		PF 12504	Flacon doseur 125 mL	24 x 125 mL
		PF 12507	Bidon de 25 L	-
		PF 12520	Flacon vapo 500 mL	20 x 500 mL
		PF 10772	Boîte de 100 coupons (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 10800	Boîte de 100 lingettes (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 12800	Boîte distributrice	2 x 50 pièces

NOTES:

NOTES:

NOTES:



SATISFAIT OU REMBOURSE

Les produits du Laboratoire Huckert's International sont **garantis contre toute insatisfaction**.
Seul un fabricant passionné peut vous apporter cette qualité.



Made In Belgium



BELGIUM

20 Avenue Lavoisier
1300 Wavre
Tel.: +32 (0)67 89 41 00

GD LUXEMBOURG

177 Rue du Luxembourg
L 8077 Bertrange
Tel.: +352 26 39 42 60

ITALY

20 Via Giulio Natta
05100 Terni
Tel.: +39 0744 80 03 87

FRANCE

38 Avenue du Centre
78230 Le Pecq-sur-Seine
Tel.: +33 (0)1 3976 1505

SWITZERLAND

10 Avenue de Belmont
1820 Montreux
Tel.: +32 (0)67 89 41 00

SINGAPORE

16 Raffles Quay, #16-02
Hong Leong Building Singapore 048581
Tel.: +65 983 45 333