



**LA MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX :  
NOTRE SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1957**




**CATALOGUE NÉONATOLOGIE**


# QUI SOMMES-NOUS?

**Entreprise familiale**, le Laboratoire Huckert's International développe et commercialise des désinfectants et des cosmétiques uniques, **totallement sécuritaires** et de haute performance pour l'ensemble de vos process de nettoyage et de désinfection.

La renommée de notre laboratoire repose sur la qualité et la technicité de ses produits, le dynamisme de ses équipes et sur un équilibre subtil entre **la chimie fine et la force des plantes**.

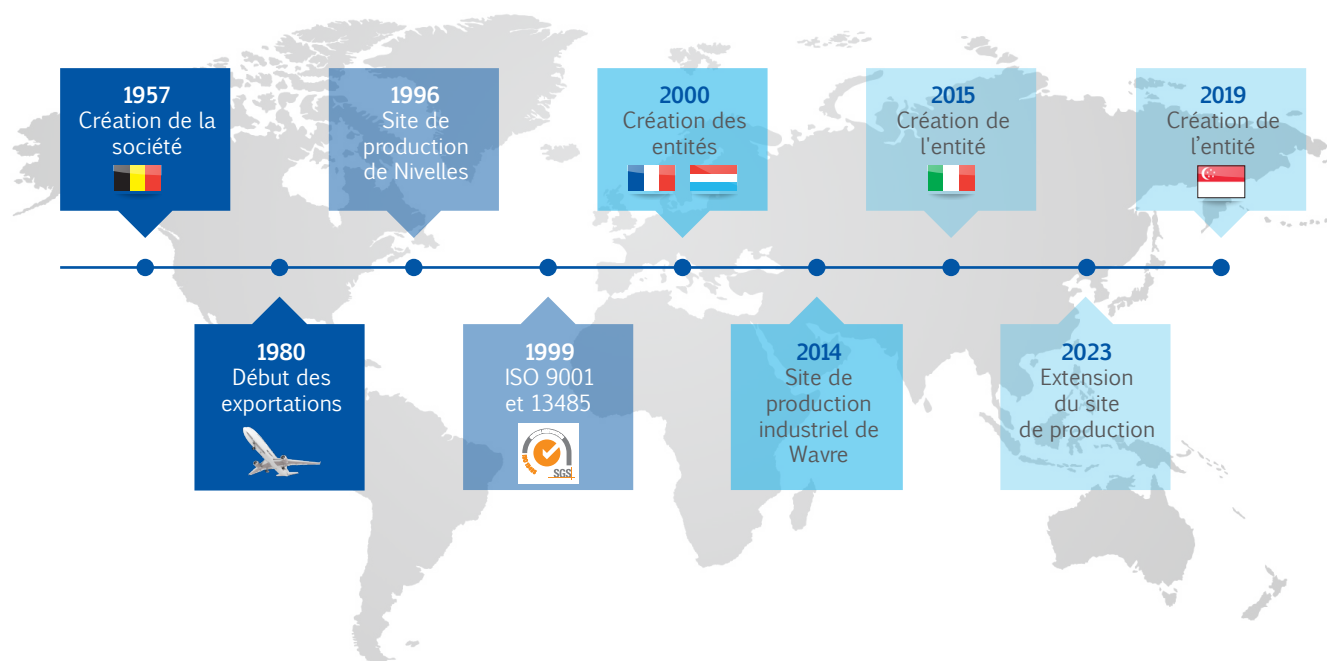

# POURQUOI DÉSINFECTER?

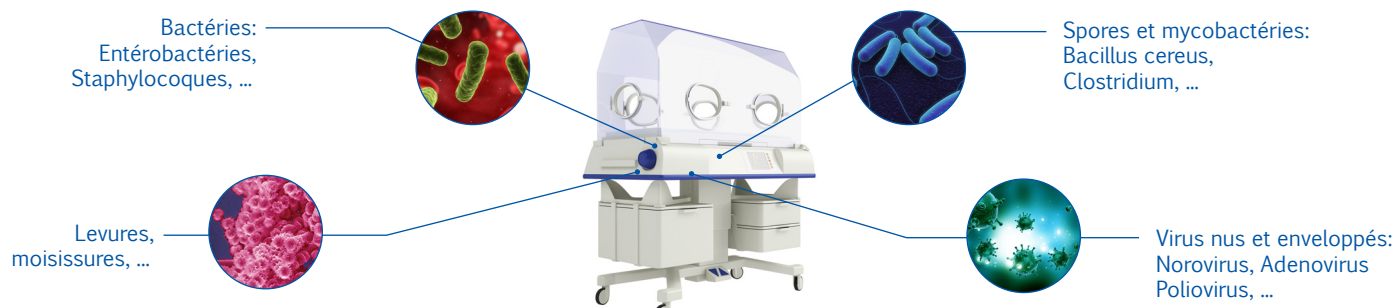

## POURQUOI DÉSINFECTER ?

À température idéale et en présence de nutriments, les micro-organismes se répliquent toutes les 20 minutes. Ainsi, une très petite quantité de germes pathogènes, originaires d'une source contaminée (mains, nez, bouche, yeux, surface, matière première) peut engendrer de toxi-infections alimentaires foudroyantes.

Il est primordial d'éliminer tout risque de contamination par des procédures de lavage et de désinfection efficaces et maîtrisées tout au long du processus de fabrication. Seul un contrôle méticuleux peut garantir la sécurité de la responsabilité professionnelle.

## LE SAVIEZ-VOUS ?

**Un produit dangereux n'est pas gage d'un produit performant** : des **normes européennes** vous permettent d'apprécier l'efficacité de vos produits. Les conditions de tests doivent se rapprocher au plus près des conditions réelles d'utilisation, et aller au-delà des simples tests d'efficacité en suspension (en phase liquide).

**«On ne désinfecte bien que ce qui est propre»**: **alcool, Javel, acide péracétique, peroxyde d'hydrogène, soude caustique** ou de nombreux désinfectants n'ont **aucune propriété détergente**. Leur performance de désinfection est affectée par la présence de saleté protéique ou autres interférents et par leur température d'utilisation.

# NOTRE MISSION

Expert en bio-décontamination et désinfection de haut niveau. Notre mission est d'assurer une désinfection sans faille sur l'ensemble de la flore pathogène même en conditions d'interférences (**bactéries, levures, champignons, mycobactéries, spores, virus nus et virus enveloppés**) sans provoquer d'effets secondaires indésirables.

“ *Ne remplacez pas un risque biologique par un danger chimique* ”



SANS DANGER POUR  
L'OPÉRATEUR



SANS DANGER POUR  
LE NOURRISSON



SANS DANGER POUR  
LE MATÉRIEL



RESPECTUEUX DE  
L'ENVIRONNEMENT

Nos produits sont **sans CMR, sans perturbateur endocrinien** et ne présentent **aucun risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique**.

pH  
neutre

✓ **FORMULE SANS**  
→ COMPOSANT CMR  
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

Nous nous sommes toujours engagés à **fabriquer et contrôler nos biocides selon les mêmes exigences que nos dispositifs médicaux**. L'ensemble de nos biocides répondent à la **réglementation Européenne Biocide N°528/2012**.

# NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le développement durable fait partie intégrante du système de management de la qualité de notre laboratoire.

Nos **Valeurs d'Entreprise Familiale** telles que **la qualité, la santé et l'éthique**, sont au cœur de toutes nos démarches et fédèrent l'ensemble de nos collaborateurs.

L'ampleur de notre engagement s'étend de la prise en charge du caractère nocif de nos produits pour L'OCME (Opérateur, Consommateur, Matériel, Environnement) à la réduction de notre impact environnemental dictée par notre activité.

Notre politique engagée en faveur de l'environnement nous pousse sans cesse à analyser, challenger et minimiser efficacement l'impact de notre activité.



- ✓ **Aucun rejet toxique ou dangereux** pour l'environnement dans les étapes du processus de fabrication de nos produits.
- ✓ **Sans risque pour l'environnement.**
- ✓ Des formulations enrichies en **huiles essentielles** et extraits concentrés de **plantes médicinales**.
- ✓ «De la désinfection à froid» pour une **facilité et rapidité d'action**.
- ✓ Des vaporisateurs prêts à l'emploi **sans gaz propulseur**.
- ✓ Une **vaste gamme** de produits concentrés.
- ✓ Des emballages issus d'un **PE green\*** avec une **empreinte carbone négative**, et entièrement **recyclable**.
- ✓ Une cotisation pour le **traitement des déchets recyclés**.
- ✓ Des systèmes **économiques** de mélange et dosage **automatique** « ECONOMATIC ».
- ✓ Des qualités constantes et traçables.

**100%**  
EMBALLAGES  
RECYCLABLES  
EN MATIÈRE  
VÉGÉTALE\*



**CARTONS,  
EMBALLAGES ET  
LINGETTES RECYCLABLES.  
PENSEZ À TRIER VOS  
DÉCHETS!**

\* Sous réserve de disponibilité de la matière première.

# L'INNOVATION EN DÉSINFECTION À FROID



**UMONIUM<sup>38</sup>**  
maître en désinfection



**SANS RÉSIDU  
APRÈS RINÇAGE**



\* Sous réserve de disponibilité de la matière première.

## UN DÉSINFECTANT ADAPTÉ À CHACUN DE VOS BESOINS

Il aura fallu 38 tentatives pour obtenir la formule qui associe **performance, rapidité, stabilité, aucun risque chimique et pH neutre.**

La formulation de l'UMONIUM<sup>38</sup>® démontre un spectre d'activité considérablement plus large. Les **temps de contact sont courts et réalistes**. Les **concentrations d'utilisation sont faibles**. Le caractère tensioactif de la formule permet à la fois une **action puissante** de détergence, de désinfection de haut niveau et l'élimination du film gras, protéique et du biofilm, par trempage, circulation de flux, essuyage humide, vaporisation, projection de mousse... À froid comme à chaud.



**Non toxique**



**Ininflammable**





**Sans vapeur  
dangereuse**

**NOUS OFFRONS L'ALTERNATIVE  
AUX PRODUITS CHIMIQUES  
DANGEREUX ET CORROSIFS**

**pH  
neutre**

**✓ FORMULE SANS**  
→ COMPOSANT CMR  
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

## Isopropyl-Tridecyl-Dimethyl Ammonium

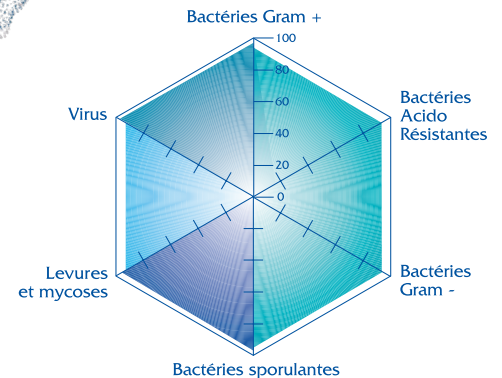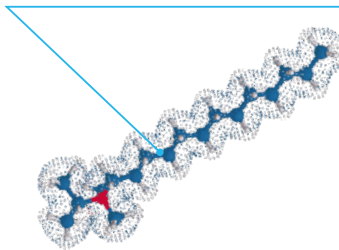

## UNE NOUVELLE CERTIFICATION POUR NOS DISPOSITIFS MÉDICAUX





Le Laboratoire Huckert's International est, en 2023, en cours de procédure de certification au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. Celui-ci concerne un champ de produits élargi par rapport à la directive 93/42/CEE et contient de nouvelles règles de classifications. Les améliorations majeures incombant à ce nouveau règlement sont :

- ✓ une évaluation de conformité renforcée (évaluation clinique)
- ✓ une augmentation du suivi post-commercialisation
- ✓ une meilleure traçabilité des produits suite à la mise en place des codes « UDI » (unique device identifier)
- ✓ une gestion des risques renforcée
- ✓ une transparence accrue par la mise en place de la plateforme européenne « EUDAMED »

La mise en conformité du Laboratoire Huckert's International en vue de la certification garantit l'excellence et la qualité désinfectants dispositifs médicaux toujours plus performants.



# UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE

SITUATIONS & CONDITIONS DE LABORATOIRE		RÉDUCTION BACTÉRIES	RÉDUCTION FONGIQUE	RÉDUCTION VIRUS	RÉDUCTION MYCOBACTÉRIES	PERFORMANCE DE DÉSINFECTION
PHASE 1	<b>ESSAI DE SCREENING</b> 	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	PERFORMANCE FAIBLE ★ Évaluation artificielle
	<b>ESSAI EN SUSPENSION</b> 	<b>99,999% 5 log</b> <b>EN 1276</b> <b>EN 13727</b> <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	<b>99,990% 4 log</b> <b>EN 1650</b> <b>EN 13624</b> <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	<b>99,990% 4 log</b> <b>EN 14476</b> <b>EN 14476</b> <i>Poliovirus 1</i> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus murin</i>	<b>99,990% 4 log</b> <b>EN 14348</b> <b>EN 14348</b> <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	PERFORMANCE INTERMÉDIAIRE ★★ Validation limitée
PHASE 2 étape 2	<b>ESSAI EN CONDITION SÈCHE</b> 	<b>99,990% 4 log</b> <b>EN 13697</b> <b>99,999% 5 log</b> <b>EN 17387</b> <b>EN 14561</b> <b>EN 16615</b> <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	<b>99,990% 4 log</b> <b>EN 13697</b> <b>EN 17387</b> <b>EN 14562</b> <b>EN 16615</b> <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	<b>99,990% 4 log</b> <b>NA</b> <b>EN 16777</b> <b>EN 17111</b> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i> <i>Vaccinia virus</i> <i>Parvovirus</i>	<b>99,990% 4 log</b> <b>NA</b> <b>EN 14563</b> <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	HAUTE PERFORMANCE ★★★ Validation proche des conditions pratiques
	<b>ESSAI EN CONDITIONS PRATIQUES</b> 	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	TRÈS HAUTE PERFORMANCE ★★★★ Validation en condition pratique

NORME CADRE EN 14885 : 2022

EN = Standard Normatif Européen

**EN XXX** = DM/Instruments

**EN XXX** = Biocides

**EN XXX** = Action mécanique

NA = Non Applicable

# POURQUOI UTILISER NOS PRODUITS ?



**UMONIUM<sup>38</sup>**  
maître en désinfection

## NOS SOLUTIONS DÉSINFECTANTES ISSUES DE LA CHIMIE FINE



**LARGE SPECTRE**  
BACTÉRICIDE, LEVURICIDE,  
MYCOBACTÉRICIDE,  
VIRUCIDE & SPORICIDE



**SÉCURITAIRES**  
SANS SUBSTANCE CMR  
OU PERTURBATEUR  
ENDOCRINIEN



**SANS RÉSIDU**  
APRÈS RINÇAGE




**TEMPS DE**  
CONTACTS  
RÉALISTES



**STABLES**



**ININFLAMMABLES**

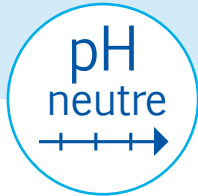

**NON CORROSIVES**



**SANS VAPEUR**  
DANGEREUSE



**NON POLLUANTES**



**SURFACTANTS**

## NOS SOLUTIONS DERMATOLOGIQUES ISSUES DES PLANTES MÉDICINALES



**PHYTOGEL<sup>®</sup>**  
By HUCKERT'S



**NON POLLUANTES**



**TEXTURE NON**  
COLLANTE



**GELS HYDROALCOOLIQUES**  
EFFICACES CONTRE MRSA  
ET CORONAVIRUS



**SÉCURITAIRES**  
INGRÉDIENTS SÉLECTIONNÉS  
PARMI LES PLUS SÉCURITAIRES



**USAGES**  
FRÉQUENTS



**POUR TOUTE**  
LA FAMILLE



**TESTÉ**  
DERMATOLOGIQUEMENT



**PARFUM 100%**  
NATUREL



**PEAUX FRAGILES**



**FORMULES AUX HUILES**  
ESSENTIELLES

# AU SERVICE DE VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ



## SERVICE NÉONATOLOGIE

Le risque d'infections nosocomiales y est plus important de par l'immaturation du système immunitaire du nouveau-né (notamment chez les grands prématurés) les rendant plus sensibles aux infections respiratoires virales ou bactériennes. Il est cependant inconcevable de recourir à des produits de désinfection standard au sein de ces services, où le risque chimique ne doit pas se substituer au risque biologique.

Les produits doivent être choisis avec soin, pour ne provoquer aucun inconfort au nourrisson. Ils doivent présenter le moindre risque cutané ou respiratoire possible, ne comporter aucune substance **CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique)**, ni perturbateur endocrinien.

Le Laboratoire Huckert's International, spécialiste des environnements à hauts risques, a développé la gamme **UMONIUM<sup>38</sup> NEUTRALIS** qui atteste d'études Internationales, répondant de façon concomitante aux besoins impératifs de performances et d'innocuité.



## BIBERONNERIE ET LACTARIUM

La gamme **UMONIUM<sup>38</sup> MASTER FOOD** propose de nouveaux détergents-désinfectants contact alimentaire de spectre total, totalement sécuritaire et spécialement recommandé en biberonnerie (étude SF2H 2019 France).

Inodore, incolore, sans risque chimique (sans CMR, sans perturbateur endocrinien), non corrosif (pH neutre), non inflammable, et remarquablement stable, la gamme **UMONIUM<sup>38</sup> MASTER FOOD** répond aux plus hautes normes d'efficacité. Elle élimine l'ensemble des pathogènes et le biofilm sans présenter aucun résidu après rinçage.



## BLOCS/SALLES DE RÉANIMATION

L'ensemble des surfaces et des dispositifs médicaux directement impliqués au service de néonatalogie, doivent être impérativement nettoyés et désinfectés par des produits de niveau Dispositif Médical, adaptés aux environnements à hauts risques.


Ils ne doivent présenter aucun risque chimique qui pourrait porter atteinte au fœtus ou au nouveau-né.



## ÉCHOGRAPHIE

De nouvelles recommandations concernant la désinfection des sondes endovaginales ont été émises, mais le recours à des produits comme le dioxyde de chlore ou l'acide peracétique sont incompatibles avec des actes aussi sensibles que l'obstétrique.

Les lingettes **UMONIUM<sup>38</sup> PROBES** offrent une alternative d'excellence ; **sans composant CMR ni perturbateur endocrinien**, elles répondent aux plus hautes normes de performance sur l'ensemble des pathogènes. Leur innocuité est validée jusqu'en environnement embryonnaire, avec un protocole simple d'application.

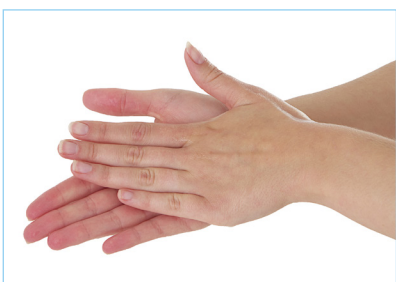

## HYGIÈNE DES MAINS ET TOILETTE DU NOUVEAU NÉ

L'hygiène des mains du personnel, et encore plus celle des nourrissons ou des petits prématurés ne peut être effectuée qu'avec des produits spécifiques, ne présentant pas le moindre risque pour le nouveau-né.

La gamme **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **genesis** 100% naturel (Gel hydroalcoolique) a été développées spécifiquement.

Toilette du nourrisson et du prématuré : *gamme à venir prochainement.*

# NOS SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE MÉTIER



UMONIUM<sup>38</sup>  
MASTER FOOD



UMONIUM<sup>38</sup>  
MASTER FOOD SPRAY



UMONIUM<sup>38</sup>  
MASTER FOOD TISSUES



## NOS BIOCIDES POUR LES SURFACES EN CONTACT AVEC LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Spécialement développé **pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires**, la gamme UMONIUM<sup>38</sup> **MASTER FOOD** vous propose des biocides sans parfum ni huile essentielle. Conforme à la **nouvelle réglementation Européenne Biocide N°528/2012**, elle convient parfaitement à l'usage quotidien des surfaces et équipements soumis à des **points critiques HACCP**.

Détergents - désinfectants et dégraissants, nos produits sont **stables, de pH neutre, sécuritaires** (inflammables, sans risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique) **et sans composant CMR ni perturbateur endocrinien**. **Efficaces sur l'ensemble de la flore pathogène**, ils répondent aux plus hauts **standards normatifs européens** et ne laissent **aucun résidu après rinçage**.



Nonfood Compounds  
D1



**Radiostérilité double emballage: disponible sur contrat**

### FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage ou essuyage humide.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).

### CONDITIONNEMENTS

1L, 5L, 25L, 200L et 1000L.

### EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Biberons
- ✓ Chauffe-biberon
- ✓ Tire-lait
- ✓ Matériel de pesée.
- ✓ Frigo/congélateur

### TEMPS DE CONTACT

15 minutes.

### FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Spray prêt à l'emploi avec double embout (vaporisation fine ou en mousse) pour une application par essuyage humide.
- ✓ 500 ml permet de traiter une surface de 100 m<sup>2</sup>.

### CONDITIONNEMENTS

500 ml.

### EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Biberons
- ✓ Chauffe-biberon
- ✓ Tire-lait
- ✓ Matériel de pesée.
- ✓ Frigo/congélateur

### TEMPS DE CONTACT

15 minutes.

### FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi pour une application par essuyage humide.
- ✓ Une lingette (20 x 20 cm) permet de traiter une surface de 3 m<sup>2</sup>.

### CONDITIONNEMENTS

Boîte distributrice de 100 lingettes (20 x 20 cm).

### EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Biberons
- ✓ Chauffe-biberon
- ✓ Tire-lait
- ✓ Matériel de pesée.
- ✓ Frigo/congélateur

### TEMPS DE CONTACT

5 minutes.





**UMONIUM<sup>38</sup>**  
**NEUTRALIS**




**UMONIUM<sup>38</sup>**  
**NEUTRALIS SPRAY**




**UMONIUM<sup>38</sup>**  
**NEUTRALIS TISSUES**



## NOS DISPOSITIFS MÉDICAUX POUR LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS SENSIBLES

Particulièrement recommandé **pour les environnements à hauts risques**, la gamme UMONIUM<sup>38</sup> **NEUTRALIS** vous propose des dispositifs médicaux sans parfum ni huile essentielle à l'**innocuité TOTALE validée jusqu'à l'environnement embryonnaire** (validations Mouse Embryo Assay et Human Sperm Survival Assay). Conforme à la **DE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux** (annexe II, excl. §4), elle convient parfaitement à l'usage quotidien des surfaces et équipements classés dispositifs médicaux et ce, des environnements les plus sensibles.

Détergents - désinfectants, nos produits sont **stables, de pH neutre, sécuritaires** (inflammables, sans risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique) **et sans composant CMR ni perturbateur endocrinien**. **Efficaces sur l'ensemble de la flore pathogène**, ils répondent aux plus hauts **standards normatifs européens** et ne laissent **aucun résidu après rinçage**.



**100%**

EMBALLAGES RECYCLABLES  
EN MATIÈRE VÉGÉTALE\*



**Radiostérilité double emballage:** disponible sur contrat

### FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage ou essuyage humide.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).


### CONDITIONNEMENTS

1L et 5L.

### EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Couveuses/incubateurs
- ✓ Giraffe/tables radiantes
- ✓ Berceaux
- ✓ Matériel d'imagerie
- ✓ Instrumentation

### TEMPS DE CONTACT

 10 minutes.

### FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Spray prêt à l'emploi avec double embout (vaporisation fine ou en mousse) pour une application par essuyage humide.
- ✓ 500 ml permet de traiter une surface de 100 m<sup>2</sup>.


### CONDITIONNEMENTS

500 ml.

### EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Couveuses/incubateurs
- ✓ Giraffe/tables radiantes
- ✓ Berceaux
- ✓ Matériel d'imagerie
- ✓ Instrumentation

### TEMPS DE CONTACT

 5 minutes.

### FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi pour une application par essuyage humide.
- ✓ Une lingette (20 x 20 cm) permet de traiter une surface de 3 m<sup>2</sup>.


### CONDITIONNEMENTS

Pochette unidose et boîte distributrice de 100 lingettes (20 x 20 cm).

### EXEMPLES D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Couveuses/incubateurs
- ✓ Giraffe/tables radiantes
- ✓ Berceaux
- ✓ Instrumentation
- ✓ ...

### TEMPS DE CONTACT

 5 secondes.

# NOS SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE MÉTIER

  
**UMONIUM<sup>38</sup>**  
**PROBES**

  
**100%**  
EMBALLAGES  
RECYCLABLES  
EN MATIÈRE  
VÉGÉTALE\*



Dispositif Médical Classe IIa

## SONDES

Spécialement développées pour la désinfection des échographes, des sondes de surfaces et endocavitaires, les lingettes **UMONIUM<sup>38</sup> PROBES** sont sans émanation toxique et tuent les germes dès 5 secondes.



— Radiostérilité double emballage: disponible sur contrat —

## FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi pour une application par essuyage humide.
- ✓ Une lingette (20 x 20 cm) permet de traiter une surface de 3 m<sup>2</sup>.

## CONDITIONNEMENTS

Pochette unidose et boîte distributrice de 100 lingettes (20 x 20 cm).


## EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Traitement des sondes endovaginales pour le suivi gynécologique et échoguidage
- ✓ Sondes d'échographie
- ✓ Console d'échographie
- ✓ Environnement du patient

## TEMPS DE CONTACT



5 secondes.

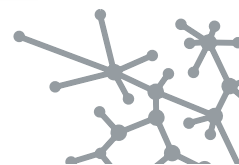

**PHYTOGEL<sup>®</sup>**

By HUCKERT'S

**genesis**

  
**100%**  
EMBALLAGES  
RECYCLABLES  
EN MATIÈRE  
VÉGÉTALE\*



## GEL HYDROALCOOLIQUE

FORMULE INODORE ENRICHIE  
EN ACTIFS ÉMOLLIENTS

L'utilisation répétée de solutions hydroalcooliques provoque un dessèchement profond de la couche cornée. La peau perd son élasticité et la moindre traction peut engendrer une déchirure du tissu épidermique.

Enrichi en actifs émollissants, hydratants et régénérants, **PHYTOGEL** By HUCKERT'S<sup>®</sup> **genesis** hydrate en profondeur tout en vous garantissant une désinfection de grade hygiénique et chirurgical.



## POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains qui ont besoin d'être désinfectées



**DÉSINFECTION  
HYGIÉNIQUE**

→ Validée dès **30 sec.**



**DÉSINFECTION  
CHIRURGICALE**

→ Validée dès **3 min.**

## CONDITIONNEMENTS

100 ml, 400 ml et 1L.

NOM	PHOTO(S)	ARTICLE N°	DÉSIGNATION	CARTON
		PF 12510	Flacon doseur 1 L	12 x 1 L
		PF 12512	Bidon de 5 L avec pompe	4 x 5 L
		PF 12515	Flacon doseur 125 mL	24 x 125 mL
		PF 12608	Flacon vapo 500 mL	24 x 500 mL
		PF 10769	Boîte de 100 coupons (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 10773	500 pochettes individuelles (20 x 20 cm)	500 x 1
		PF 12505	Flacon doseur 1 L	12 x 1 L
		PF 12506	Bidon de 5 L avec pompe	4 x 5 L
		PF 12504	Flacon doseur 125 mL	24 x 125 mL
		PF 12507	Bidon de 25 L	-
		PF 12508	Fût de 200 L	-
		PF 12509	IBC de 1000 L	-
		PF 12520	Flacon vapo 500 mL	24 x 500 mL
		PF 10772	Boîte de 100 coupons (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 10800	Boîte de 100 lingettes (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 12800	Boîte distributrice	2 x 50 pièces









**UMONIUM<sup>38</sup>**  
maître en désinfection

**PHYTOGEL<sup>®</sup>**  
By HUCKERT'S  
excellence en dermo protection



**SATISFAIT OU REMBOURSÉ**

Les produits du Laboratoire Huckert's International sont **garantis contre toute insatisfaction**.  
Seul un fabricant passionné peut vous apporter cette qualité.



\* Sous réserve de disponibilité de la matière première.



[www.huckerts.net](http://www.huckerts.net)