

LA MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX : NOTRE SAVOIR FAIRE DEPUIS 1957




CATALOGUE SECTEUR : GYNÉCOLOGIE


QUI SOMMES-NOUS ?

Entreprise familiale, le Laboratoire Huckert's International développe et commercialise des désinfectants et des cosmétiques uniques, **totalement sécuritaires** et de haute performance pour l'ensemble de vos process de nettoyage et de désinfection.

La renommée de notre laboratoire repose sur la qualité et la technicité de ses produits, le dynamisme de ses équipes et sur l'équilibre subtil entre **la chimie fine et la force des plantes**.

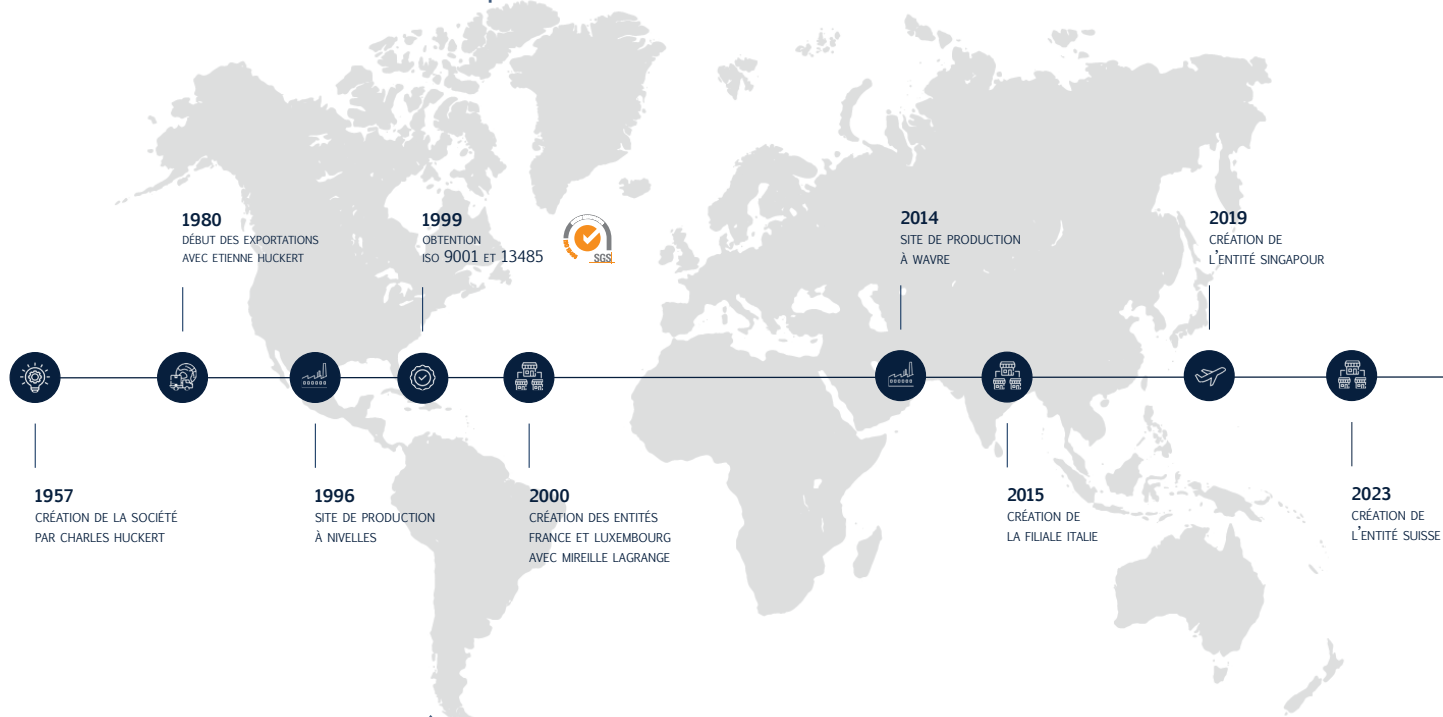

POURQUOI DÉSINFECTER ?

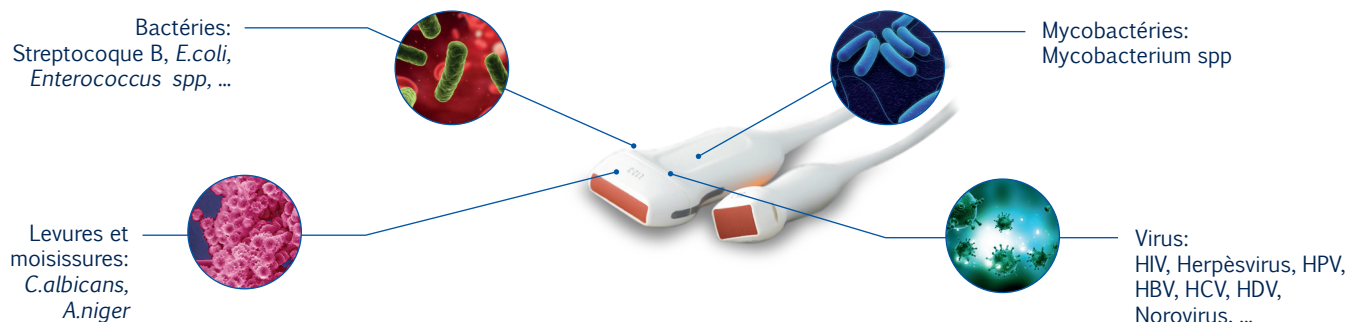

POURQUOI DÉSINFECTER ?

À température idéale et en présence de nutriments, les micro-organismes se répliquent toutes les 20 minutes. Ainsi, une très petite quantité de germes pathogènes, originaires d'une source contaminée (mains, nez, bouche, yeux, surface, équipements et dispositifs, matière première) peut engendrer une contamination croisée fongique, virale ou bactérienne, et être à la source d'une infection.

Il est primordial d'éliminer tout risque de contamination par des procédures de lavage et de désinfection efficaces et maîtrisées tout au long de la chaîne de soins. Seul un contrôle méticuleux peut garantir la sécurité de la responsabilité professionnelle.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un produit dangereux n'est pas gage d'un produit performant : des **normes européennes** vous permettent d'apprécier l'efficacité de vos produits. Les conditions de tests doivent se rapprocher au plus près des conditions réelles d'utilisations, et aller au-delà des simples tests d'efficacité en suspension (en phase liquide).

«On ne désinfecte bien que ce qui est propre»: **alcool, composés chlorés, acide péracétique, peroxyde d'hydrogène, soude caustique** ou de nombreux désinfectants n'ont **aucune propriété détergente**. Leur performance de désinfection est affectée par la présence de saleté protéique ou autres interférents et par leur température d'utilisation.

NOTRE MISSION

Expert en **bio-décontamination et désinfection de haut niveau**. Notre mission est d'assurer une désinfection sans faille sur l'ensemble de la flore pathogène même en conditions d'interférences (**bactéries, levures, champignons, mycobactéries, spores, virus nus et virus enveloppés**) sans provoquer d'effets secondaires indésirables.

“ Ne remplacez pas un danger biologique par un risque chimique ”



RESPECTUEUX DE
L'OPÉRATEUR



RESPECTUEUX DE
LA PATIENTE



RESPECTUEUX DU
MATÉRIEL



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT

Nos produits sont **sans CMR, sans perturbateur endocrinien** et ne présentent **aucun risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique**.

pH
neutre

✓ **FORMULE SANS**
→ COMPOSANT CMR
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

Nous nous sommes toujours engagés à **fabriquer et contrôler nos Biocides selon les mêmes exigences que nos Dispositifs Médicaux**. L'ensemble de nos biocides répondent à la **réglementation Européenne Biocide N°528/2012**.

NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le développement durable fait partie intégrante du système de management de la qualité de notre laboratoire.

Nous recherchons avant tout à faire adhérer nos collaborateurs à nos **valeurs d'entreprise familiale. Qualité, santé, éthique sont au coeur de toutes nos démarches**.

Allant du caractère non nocif de nos produits pour L'OPME (Opérateur, Patient, Matériel, Environnement) à la réduction de notre impact environnemental dictée par notre activité.

Afin de maîtriser les risques environnementaux, nous suivons **la voie de l'amélioration continue** car rien n'est jamais acquis. Nous **analysons, évaluons, estimons et améliorons l'impact sur l'environnement**.



- ✓ **Aucun rejet toxique ou dangereux** pour l'environnement dans les étapes du processus de fabrication de nos produits.
- ✓ **Sans risque pour l'environnement.**
- ✓ Des formulations enrichies en **huiles essentielles** et extraits concentrés de **plantes médicinales**.
- ✓ «De la désinfection à froid» pour une **facilité et rapidité d'action**.
- ✓ Des vaporisateurs prêts-à-l'emploi **sans gaz propulseur**.
- ✓ Une **vaste gamme** de produits concentrés.
- ✓ Des emballages issus d'un **PE green*** avec une **empreinte carbone négatives**, et entièrement **recyclables**.
- ✓ Une cotisation pour le **traitement des déchets recyclés**.
- ✓ Des systèmes **économiques** de mélange et dosage **automatique** « ECONOMIC ».
- ✓ Des qualités constantes et traçables.

100%
EMBALLAGES
RECYCLABLES
EN MATIÈRE
VÉGÉTALE*



CARTONS,
EMBALLAGES ET
LINGETTES RECYCLABLES.
PENSEZ À TRIER VOS
DÉCHETS!

* Sous réserve de disponibilité de la matière première.

L'INNOVATION EN DÉSINFECTION À FROID



UMONIUM³⁸
maître en désinfection



**SANS RÉSIDU
APRÈS RINÇAGE**



** Sous réserve de disponibilité de la matière première.*



Non toxique



Ininflammable



**Sans vapeur
dangereuse**

**NOUS OFFRONS L'ALTERNATIVE
AUX PRODUITS CHIMIQUES
DANGEREUX ET CORROSIFS**

**pH
neutre**



✓ **FORMULE SANS**
→ COMPOSANT CMR
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

UN DÉSINFECTANT ADAPTÉ À CHACUN DE VOS BESOINS

Il aura fallu 38 tentatives pour obtenir la formule qui associe **performance, rapidité, stabilité, aucun risque chimique et pH neutre.**

La formulation de l'UMONIUM³⁸ démontre un spectre d'activité considérablement plus large. Les **temps de contact sont courts et réalistes**. Les **concentrations d'utilisation sont faibles**. Le caractère tensioactif de la formule permet à la fois une **action puissante** de détergence, de désinfection de haut niveau et l'élimination du film gras, protéique et du biofilm, par trempage, circulation de flux, essuyage humide, vaporisation, projection de mousse... À froid comme à chaud.

Isopropyl-Tridecyl-Dimethyl Ammonium

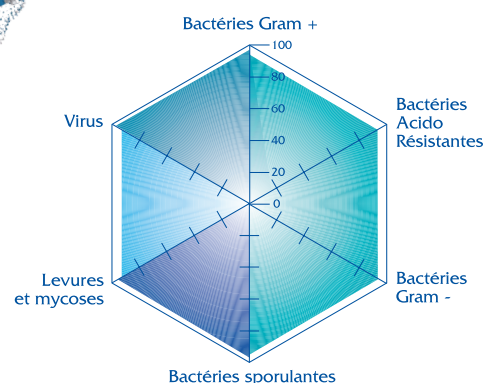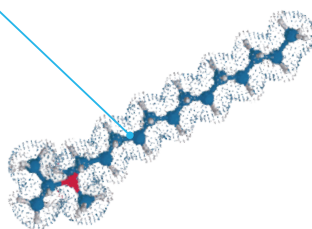

UNE NOUVELLE CERTIFICATION POUR NOS DISPOSITIFS MÉDICAUX

Le Laboratoire Huckert's International est, en 2023, en cours de procédure de **certification au règlement MDR (UE) 2017/745** relatif aux dispositifs médicaux. Celui-ci concerne un champ de produits élargi par rapport à la directive 93/42/CEE et contient de nouvelles règles de classifications. Les améliorations majeures incombant à ce nouveau règlement sont :

- ✓ une évaluation de conformité renforcée (évaluation clinique)
- ✓ une augmentation du suivi post-commercialisation
- ✓ une meilleure traçabilité des produits suite à la mise en place des codes « UDI » (unique device identifier)
- ✓ une gestion des risques renforcée
- ✓ une transparence accrue par la mise en place de la plateforme européenne « EUDAMED »

La conformité à cette **nouvelle réglementation** du système qualité du Laboratoire Huckert's International est la garantie de l'excellence de l'ensemble de nos produits pour le traitement de vos dispositifs médicaux.

UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE

	SITUATIONS & CONDITIONS DE LABORATOIRE	RÉDUCTION BACTÉRIES	RÉDUCTION FONGIQUE	RÉDUCTION VIRUS	RÉDUCTION MYCOBACTÉRIES	PERFORMANCE DE DÉSINFECTION
PHASE 1	ESSAI DE SCREENING 	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	PERFORMANCE FAIBLE ★ Évaluation artificielle
PHASE 2 étape 1	ESSAI EN SUSPENSION 	99,999% 5 log EN 1276 EN 13727 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	99,990% 4 log EN 1650 EN 13624 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	99,990% 4 log EN 14476 EN 14476 <i>Poliovirus 1</i> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus murin</i>	99,990% 4 log EN 14348 EN 14348 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	PERFORMANCE INTERMÉDIAIRE ★ ★ Validation limitée
PHASE 2 étape 2	ESSAI EN CONDITION SÈCHE 	99,990% 4 log EN 13697 99,999% 5 log EN 17387 EN 14561 EN 16615 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	99,990% 4 log EN 13697 EN 17387 EN 14562 EN 16615 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	99,990% 4 log NA EN 16777 EN 17111 <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i> <i>Vaccinia virus</i> <i>Parvovirus</i>	99,990% 4 log NA EN 14563 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	HAUTE PERFORMANCE ★ ★ ★ Validation proche des conditions pratiques
PHASE 3	ESSAI EN CONDITIONS PRATIQUES 	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	TRÈS HAUTE PERFORMANCE ★ ★ ★ ★ Validation en condition pratique

NORME CADRE EN 14885 : 2022

EN = Standard Normatif Européen

EN XXX = DM/Instruments

EN XXX = Biocides

EN XXX = Action mécanique

NA = Non Applicable

POURQUOI UTILISER NOS PRODUITS ?



UMONIUM³⁸
maître en désinfection

NOS SOLUTIONS DÉSINFECTANTES ISSUES DE LA CHIMIE FINE



LARGE SPECTRE
BACTÉRICIDE, LEVURICIDE,
MYCOBACTÉRICIDE,
VIRUCIDE & SPORICIDE



SÉCURITAIRES
SANS SUBSTANCE CMR
OU PERTURBATEUR
ENDOCRINIEN



SANS RÉSIDU
APRÈS RINÇAGE




TEMPS DE
CONTACTS
RÉALISTES



STABLES



ININFLAMMABLES

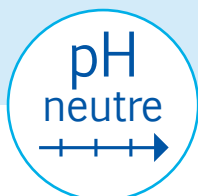

NON CORROSIVES



SANS VAPEUR
DANGEREUSE



NON POLLUANTES



SURFACTANTS

NOS SOLUTIONS DERMATOLOGIQUES ISSUES DES PLANTES MÉDICINALES


PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S



NON POLLUANT



TEXTURE NON
COLLANTE



GELS HYDROALCOOLIQUES
EFFICACES CONTRE MRSA
ET CORONAVIRUS



SÉCURITAIRES
INGRÉDIENTS SÉLECTIONNÉS
PARMI LES PLUS
SÉCURITAIRES



USAGES
FRÉQUENTS



POUR TOUTE
LA FAMILLE



TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT



PARFUM 100%
NATUREL



PEAUX FRAGILES



FORMULES AUX
HUILES ESSENTIELLES

AU SERVICE DE VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ



Qu'il s'agisse de suivi gynécologique ou d'obstétrique, d'acte en cabinet ou d'intervention en établissement de santé, l'impératif de la gestion du risque infectieux ne doit pas faire oublier le risque chimique.

Les perturbateurs endocriniens seraient en grande partie responsables de dysfonctionnements hormonaux, des troubles de l'ovulation et de la fertilité ; Il semble de ce fait, tout à fait impensable et déplacé d'utiliser des produits présentant le moindre risque chimique lors de suivi gynécologique.

La désinfection de l'ensemble des dispositifs médicaux intervenant en obstétrique ne devrait également être réalisée qu'à l'aide de produit sécuritaire, ne présentant pas de risque pour le fœtus et la patiente.

ÉCHOGRAPHIE



Prêtes à l'emploi, inodores et à PH neutre, les lingettes **UMONIUM³⁸ PROBES** sont l'assurance d'une désinfection haute performance et sécurité.

Leur **innocuité, validée** jusqu'en environnement embryonnaire et ajoutée à **l'absence totale de repro-toxicité**, assure une utilisation des lingettes efficace et totalement sécuritaire correspondante aux plus hautes exigences de la MDR (**gynécologique, obstétrique, en FIV/AMP** lors d'échographie d'échoguidage ou de contrôle).

Le protocole d'une grande simplicité et la qualité exceptionnelle des lingettes offrent un confort de travail inégalé sans risque chimique ni inconfort pour l'opérateur et la patiente.

UNITÉ CLINIQUE

La maîtrise du risque infectieux est un impératif, mais Il est également inconcevable de recourir à des produits standards et ne pas prendre en compte les risques de repro-toxicité, ou de toxicité pour le fœtus que représentent les produits utilisés.

UMONIUM³⁸ NEUTRALIS est un produit **détergent-désinfectant de haut niveau** spécialement adapté. Il est utilisable sur l'ensemble des surfaces, les équipements, les dispositifs médicaux les plus sensibles et l'instrumentation. Il ne contient **aucune substance CMR, ni perturbateur endocrinien**, et son innocuité est validée jusqu'en environnement embryonnaire.



NOS SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE MÉTIER

1L = 40 L
solution de
désinfection



UMONIUM³⁸
NEUTRALIS



Dispositif Médical Classe IIb

500
vaporisation
= 100 m²



UMONIUM³⁸
NEUTRALIS SPRAY



Dispositif Médical Classe IIb

1 Lingette
= 3 m²



UMONIUM³⁸
NEUTRALIS TISSUES



Dispositif Médical Classe IIb



UMONIUM³⁸
PROBES



Dispositif Médical Classe IIb

SOLS, SURFACES ET ÉQUIPEMENTS

Particulièrement recommandée pour les environnements à hauts risques, la gamme **UMONIUM³⁸ NEUTRALIS** vous propose des dispositifs médicaux sans parfum ni huile essentielle à l'innocuité TOTALE validée jusqu'à l'environnement embryonnaire (validations Mouse Embryo Assay et Human Sperm Survival Assay).

Répondant au double enjeu de performance et d'innocuité, il valide les plus hautes normes de performance tout en répondant aux tests de repro-toxicité et d'embryo-toxicité. Il s'utilise pour les phases de pré-désinfection et de désinfection de l'ensemble des surfaces, des équipements et des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs les plus sensibles.



100%

EMBALLAGES RECYCLABLES
EN MATIÈRE VÉGÉTALE*



SONDES

Spécialement développées pour la désinfection des échographes, des sondes d'échographie et endocavitaires, les lingettes **UMONIUM³⁸ PROBES** sont sans émanation toxique et tuent les germes dès 5 secondes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage ou essuyage humide.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).
- ✓ 1L = 40 L de solution de désinfection

CONDITIONNEMENTS

25mL, 125 ml, 1L et 5L

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Instruments
- ✓ Dispositifs médicaux invasifs et non invasifs
- ✓ Protocole fin de journée
- ✓ Équipements
- ✓ Surfaces basses et hautes

TEMPS DE CONTACT

 10 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Spray prêt à l'emploi avec double embout (vaporisation fine ou en mousse) pour une application par essuyage humide.
- ✓ 500 ml permet de traiter une surface de 100 m².

CONDITIONNEMENTS

250 ml et 500 ml

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Surfaces basses et hautes
- ✓ Équipements
- ✓ Dispositifs médicaux
- ✓ Hottes à flux laminaire
- ✓ Incubateurs

TEMPS DE CONTACT

 5 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi pour une application par essuyage humide.
- ✓ Une lingette (20 x 20 cm) à la pulpe de bois.

CONDITIONNEMENTS

Pochette unidose et boîte distributrice de 100 lingettes (20 x 20 cm).

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Ensemble des surfaces, équipements et dispositifs médicaux non invasifs
- ✓ Hottes à flux laminaire
- ✓ Incubateurs

TEMPS DE CONTACT

 5 secondes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi pour une application par essuyage humide.
- ✓ Une lingette (20 x 20 cm) permet de traiter une surface de 3 m².
- ✓ Boîte distributrice 2 x 50 lingettes unitaires.

CONDITIONNEMENTS

Pochette unidose et boîte distributrice de 100 lingettes (20 x 20 cm).

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Traitement des sondes endovaginales pour le suivi gynécologique et échoguidage
- ✓ Sondes d'échographie

TEMPS DE CONTACT

 5 secondes.



LINGETTES SÈCHES

100 lingettes sèches à utiliser en complément de notre gamme **UMONIUM³⁸ NEUTRALIS SPRAY**. Lingettes à usage unique de **haute résistance** pour une application sur l'ensemble des surfaces et des dispositifs médicaux

Ecologiques et 90 % **biodégradables** après 45 jours et 100 % après 76 jours, nos lingettes sont **respectueuses** de l'environnement. Recommandable pour les environnements contrôlés ISO 5 - 8.



**ABSORBENT: 1150%
EXTRA STRONG**

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi
- ✓ Boîte distributrice de 100 lingettes

COMPOSITION


- ✓ Pulpe de bois (51 %) et Viscose (49 %)

CONDITIONNEMENTS

Boîte distributrice de 100 lingettes (20 x 20 cm)

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Ensemble des surfaces, équipements et dispositifs médicaux non invasifs (PSM, paillasse, incubateurs, équipement ICSI...)

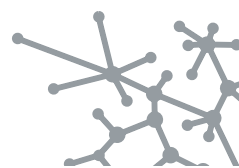


By HUCKERT'S
genesis



100%

EMBALLAGES
RECYCLABLES
EN MATIÈRE
VÉGÉTALE*

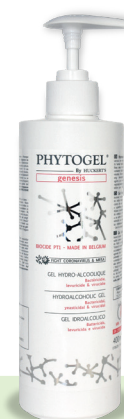

GEL HYDROALCOOLIQUE

FORMULE INODORE ENRICHIE
EN ACTIFS ÉMOLLIENTS

L'utilisation répétée de solutions hydroalcooliques provoque un dessèchement profond de la couche cornée. La peau perd son élasticité et la moindre traction peut engendrer une déchirure du tissu épidermique. La gestion des contaminations croisées passent d'abord par une désinfection des mains.

Enrichi en actifs émollissants, hydratants et régénérants, **PHYTOGEL** By HUCKERT'S® **genesis** hydrate en profondeur tout en vous garantissant une désinfection de grade hygiénique et chirurgical.



POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains qui ont besoin d'être désinfectées



**DÉSINFECTION
HYGIÉNIQUE**

➔ Validée dès **30 sec.**




**DÉSINFECTION
CHIRURGICALE**

➔ Validée dès **3 min.**

CONDITIONNEMENTS

3 ml, 100 ml, 400 ml et 1L.

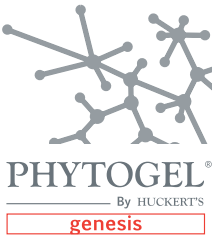NOM	PHOTO(S)	ARTICLE N°	DÉSIGNATION	CARTON
		PF 15515	Easydose 25 ml	2 x 50 pieces
		PF 12510	Flacon doseur 1L	12 x 1L
		PF 12512	Bidon de 5L avec pompe	4 x 5L
		PF 12515	Flacon doseur 125 mL	24 x 125 mL
		EMB 0013	Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 0,5 %	1 pièce
		EMB 0013 - 2.5 %	Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 2.5 %	1 pièce
		EMB 5101	Support en inox pour 5L	1 pièce
		PF 12608	Flacon vapo 500 mL	20 x 500 mL
		PF 12609	Flacon vapo 250 mL	24 x 250 mL
		EMB 0099	100 serviettes UMONIUM ³⁸ Wipes	12 pièces
		PF 10769	Boîte de 100 coupons (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 10779	500 pochettes individuelles (20 x 20 cm)	500 x 1
		PF 10800	Boîte de 100 lingettes (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 12800	Boîte distributrice	2 x 50 pièces
		PF 20803	Flacon de poche 100 mL	28 x 100 mL
		EMB 6075	Easydose de 3 mL	500 x 3 mL
		PF 20806	Flacon 400 mL	15 x 400 mL
		EMB 6100	Support en inox pour flacon de 400 mL	1 pièce
		EMB 1253	Distributeur mural automatique	1 pièce
		EMB 1252	Distributeur mural manuel	1 pièce
		PF 20821	Recharge 1L distributeur manuel et automatique	11 x 1L

UMONIUM³⁸
**INFECTION
CONTROL KIT**



ARTICLE N°	DÉSIGNATION	CARTON
PF 40006	Incubateur + consommables (100 boîtes de pétri, 100 étiquettes et 1 carnet de traçabilité)	1 kit
PF 40007	Consommables (100 boîtes de pétri, 100 étiquettes et 1 carnet de traçabilité)	1 kit
EMB 5040	Incubateur	1 pièce

UMONIUM³⁸ **ICK** est votre outil de contrôle pour vérifier votre performance en désinfection sur les différents environnements traités. Ce moyen vous permettra de juger de la pertinence des procédures que vous appliquez et mesurera l'efficacité des produits que vous utilisez.

Pour être performant dans un domaine, il faut pouvoir l'évaluer. Ce Kit de Contrôle Infectieux vous apportera précision et maîtrise de vos directives auprès de vos équipes.


UMONIUM³⁸
ECONOMATIC

Les bidons de 5L se connectent directement à la station de dosage **ECONOMATIC**. Ce système permet un dosage simple et très précis. Il ne nécessite pas de calculs de concentration compliqués. Il suffit de pousser sur le bouton pour que la centrale dispense la quantité souhaitée.



Support en inox 5L

Conçu pour être vissé au mur, il est solide et facile à nettoyer. Son cadenas évite les vols potentiels.

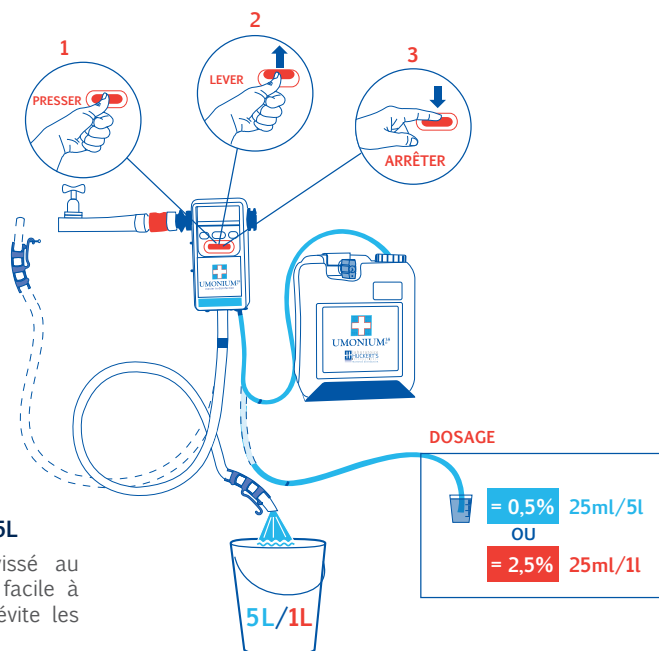

NOTES:



SATISFAIT OU REMBOURSE

Les produits du Laboratoire Huckert's International sont **garantis contre toute insatisfaction**.
Seul un fabricant passionné peut vous apporter cette qualité.



BELGIUM

20 Avenue Lavoisier
1300 Wavre
Tel.: +32 (0)67 89 41 00

GD LUXEMBOURG

177 Rue du Luxembourg
L 8077 Bertrange
Tel.: +352 26 39 42 60

ITALY

20 Via Giulio Natta
05100 Terni
Tel.: +39 0744 80 03 87

FRANCE

38 Avenue du Centre
78230 Le Pecq-sur-Seine
Tel.: +33 (0)1 3976 1505

SWITZERLAND

10 Avenue de Belmont
1820 Montreux
Tel.: +32 (0)67 89 41 00

SINGAPORE

Spaces, 292 Joo Chiat Road
Singapore 427544
Tel.: +65 983 45 333